


Einführung

emmi®-Steri UVC LED ist eine Aufbewahrungsbox mit Sterilisations-Funktion für Beauty- und Nagel-Produkte sowie Alltags-Objekte. Sterilisieren (99,99%) auf medizinischen Niveau, innerhalb von 3 Minuten.

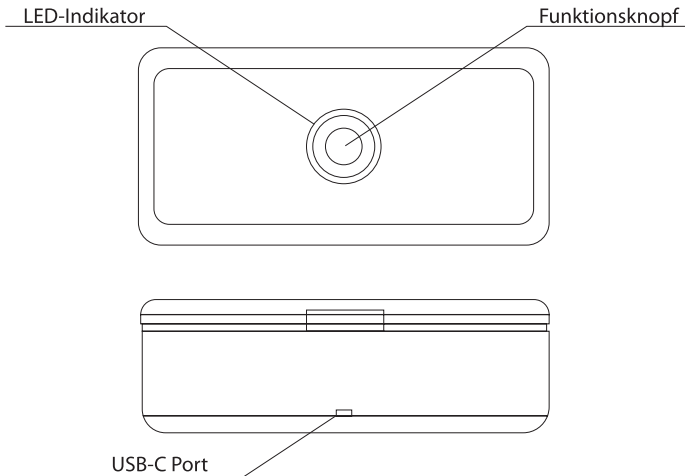

Anleitung

1. Einschalten:

Drücken Sie die Taste 3 Sekunden, um das Gerät zu starten.

Sobald das Gerät im Standby-Modus ist, leuchtet der LED-Indikator weiß auf. Drücken Sie die Taste erneut 3 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

2. Sterilisieren:

Drücken Sie den Knopf erneut, um den 3-minütigen Sterilisierungsvorgang zu starten.

Während des Vorgangs, blinkt der LED-Indikator mehrfach weiß auf bis sich der Ring gefüllt hat.

Das Gerät schaltet sich wieder in den Standby-Modus, sobald der Vorgang beendet ist.

3. LED-Indikator:

- (1) Start: Weißes Licht leuchtet einmal auf
- (2) Standby Modus: Weißes Licht leuchtet dauerhaft
- (3) Sterilisieren: Weißes Licht vervollständigt den Kreis

4. Automatische Abschaltung:

Das Gerät schaltet sich nach 15 Stunden automatisch aus.

5. Sicherheitssensor:

Im Deckel befindet sich ein Sensor, sodass beim Öffnen des Gerätes die LEDs abgeschaltet werden, um ihre Augen zu schützen.

Technische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Länge	235	mm
Breite	108	mm
Höhe	75,5	mm
Leistung	max. 8	W
Stromversorgung	10 V = 700mA	-
Wellenlänge	260 - 280	nm
Eingangsschnittstelle	Type-C USB	
Timer	3	min

Technische Änderungen vorbehalten!

UVC-Leistungsstandards zur Desinfektion

Bakterien/Viren	UVC Leistung (mW)
Bacillus Coli	6,6
Influenza Virus	6,6
Bacillus Typhi	4,1
Bacillus Dysenteriae	4,2
Salmonella	7,6
Viralhepatitis	8,0
Micrococcus Gonococcus	8,5
weitere Bazillen	10,0

UVC zerstört die DNA von Bakterien und jegliche Art von Keimen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät nutzen.
2. Die Stromversorgung muss mit dem Gerät kompatibel sein.
3. Schauen Sie nicht in die UVC-LEDs, da Ihre Augen beschädigt werden können.
4. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
5. Halten Sie das Gerät trocken.
6. Bitte schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, **um Strom zu sparen.**
7. Die aus photosensitiven Material gefertigte Halterung, verändert durch Bestrahlung von UVC-Strahlen ihre Farbe. Diese kehrt nach einiger Zeit zu ihrer Original-Farbe zurück.



emmi®-Steri UVC LED

Bedienungsanleitung




99,99 % aller Bakterien und Keime werden zerstört
in 3 Minuten steril
automatische Abschaltung nach 15 Stunden Standby
weites Spektrum an sterilisierbaren Objekten
einfache Bedienung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben.
Um Bedienungsfehler zu vermeiden, bitten wir Sie diese Bedienungsanleitung
sorgfältig zu lesen.

Emmi Ultrasonic GmbH
Gerauer Straße 34
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 / 40 67 94
www.emmi-ultrasonic.de

Introduction

emmi®-Steri UVC LED is a storage box with sterilization function(for hair-dressing, beauty, nail tools). The product applies medical grade 3 minutes sterilization, with sterilization rate up to 99,99%.

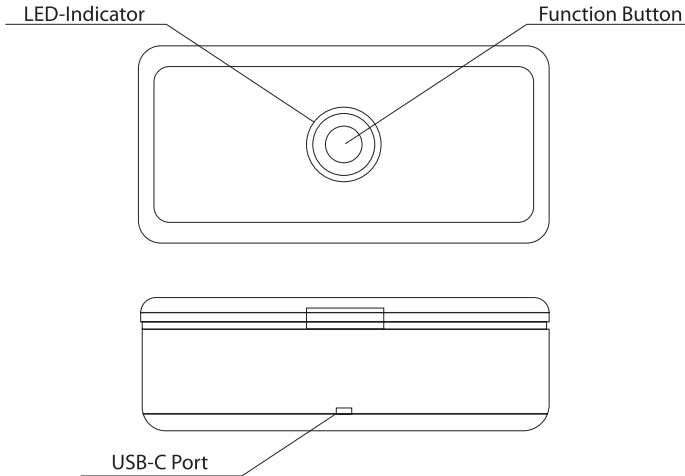

Instruction

1. Power on/off:

Press the button 3 seconds to start the device.
White light flashes once for standby mode.
Press the button 3 seconds to power off.

2. Sterilizing:

Pressing again to initiate 3 min sterilization during standby mode.
The LED-Indicator blinks white during the sterilization process.
The device will turn back to standby mode after sterilization.

3. LED-Indicator:

- (1) Start: white light and flashes once
- (2) Standby mode: white permanent light
- (3) Sterilizing: white blinking light

4. Automatic shutdown:

The device will turn off automatically after 15 hours of standby time.

5. Safety sensor:

A built-in sensor will turn off the UVC LED when the device is opened during the sterilization process to prevent eye damage.

Technical Data

Parameter	Value	Unit
Length	235	mm
Width	108	mm
Height	75,5	mm
Power	max. 8	W
Power supply	10 V = 700mA	-
Wavelength	260 - 280	nm
Input connector	Type-C USB	
Timer	3	min

Technical changes reserved.

UVC-Power standards for disinfection

Bacteria/Virus	UVC Power (mW)
Bacillus Coli	6,6
Influenza Virus	6,6
Bacillus Typhi	4,1
Bacillus Dysenteriae	4,2
Salmonella	7,6
Viralhepatitis	8,0
Micrococcus Gonococcus	8,5
Bacillus	10,0

UVC destroys the DNA of bacteria and kills all kinds of germs

Caution

1. Please read the manual carefully before using.
2. The working voltage has to be compatible with the product.
3. Do not stare at the UVC Light. It may cause discomfort or retinal damage
4. Keep the product away from children
5. Keep the device dry.
6. Please turn off the device to save power when not in use.
7. Bracket made of photosensitive material will change color if irradiated. It will recover its original color after a while.



emmi®-Steri UVC LED

Manual



99,99 % of Bacteria and Germs are destroyed
Sterilization in 3 min
turns of automatically after 15 hours in Standby
big variety of cleanable objects
simple use

Thank you for choosing our device. To avoid operating errors, please read the operating manual carefully.

Emmi Ultrasonic GmbH
Gerauer Straße 34
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 / 40 67 94
www.emmi-ultrasonic.de